



BELANGRIJK

✓ LEES DE INSTRUCTIES

Het opvolgen van de instructies vergroot de nauwkeurigheid van het onderzoek

✓ AANVRAAGFORMULIER

Vul de invulvelden in die van toepassing zijn op het aanvraagformulier en vergeet deze niet mee te sturen met het monster

✓ PROBIOTICA

Indien van toepassing: stop vijf dagen voor de afname met het gebruiken van probiotica

✓ MONSTERNAME

Het verse monster (potje met bruine dop) kan alleen op maandag, dinsdag of woensdag worden afgenomen en ingestuurd.

INFORMATIE

✓ Binnen 7 tot 10 werkdagen uitslag

✓ De uitslag wordt gerapporteerd aan uw zorgverlener of aan uw darmklachten.nl account toegevoegd

✓ De medewerkers van het laboratorium zijn niet medisch onderlegd; u kunt niet bij hen terecht voor aanvullend advies over uw uitslagen

✓ Persoonsgegevens worden door MGLab&Advies B.V. opgenomen in een beveiligd digitaal patiëntenarchief waarop het privacyreglement van toepassing is conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens

✓ De onderzoeken komen niet in aanmerking voor vergoeding bij uw zorgverzekeraar

INSTRUCTIES en INFORMATIE

VERS MONSTER


Instructie afname vers monster

- Neem het monster op **maandag, dinsdag** of uiterlijk **woensdag**
- Vang de ontlasting droog op met het bijgeleverde fecesopvangsysteem
- Trek de latexvrije handschoenen aan
- Gebruik de ontlasting dat als laatste het lichaam heeft verlaten
- Breng met het lepeltje, dat zich in de dop van de buis bevindt, ontlasting over in de buis
- (!) Vul het potje tot de aangegeven streep op het etiket!
- Draai de bruine dop stevig aan
- Gooi de handschoenen weg bij het normale afval



Instructie inpakken en verzenden

- Plaats het buisje in de RigidSafetyBag en sluit deze door de sluitstrip te verwijderen
 - Plaats de RigidSafetyBag samen met het **aanvraagformulier** in de verzendenvelop
 - Sluit je verzendenvelop door de witte plakstrip te verwijderen
 - Post de envelop met inhoud - op de dag van afname - vlak voor de lichte van de brievenbus (**vóór 17.00 uur**)
- OPMERKING:** Ben je vergeten op de dag van afname het monster te posten, bewaar dan het monster in de koelkast en verzend deze de volgende dag. Doe dit echter alleen op maandag, dinsdag of woensdag en niet vlak voor het weekend.

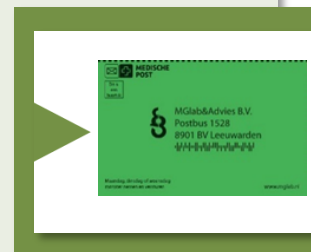

CONTACT

Postbus 1528 - 8901 BV Leeuwarden
Agora 1 - 8934 CJ Leeuwarden
info@mglab.nl - www.mglab.nl - 058 2120025